

規格 (適用於200KG以下的動物)

尺寸	650(W)X600(D)X1320(H)	
重量	38KG	
螢幕	10.3" 高解析觸控螢幕	
驅動氣	工作原理	氣動電控
	驅動氣體	氧氣/空氣
	氣源壓力	0.28MPa - 0.6MPa
	驅動氣體流速	≥60L/min
通氣模式	手動通氣	
	VCV(容積控制通氣模式) · PCV(壓力控制通氣模式) · SIMV-VC(同步間歇容積控制通氣模式+壓力支持) · SIMV-PC(同步間歇壓力控制通氣模式+壓力支持) 選配：PRVC(壓力調節容積控制通氣模式) · AUTO(自動跟隨容積控制通氣模式) · Option：CT-MODE(CT室遠端操作)	
波形圖	直流	
流量計	Air:0-4L · O ₂ :0-4L	
潮氣量	5ml - 1500ml	
呼吸頻率	4 bpm - 100 bpm	
吸呼比	4:1 - 1:10	
壓力限制	10cm H ₂ O - 100cm H ₂ O	
壓力支持	5cm H ₂ O - 70cm H ₂ O	
吸氣壓力	5cm H ₂ O - 70cm H ₂ O	
吸氣暫停比	OFF · 0% - 60%	
電子PEEP閥	OFF · 4cm H ₂ O - 30cm H ₂ O	
快速充氧	25L/min - 75L/min	
數據輸出介面	LAN,USB	
揮發罐	Dräger Vapor 2000 (ISO · SEV)	
監護參數	潮氣量 · 分鐘通氣量 · 呼吸頻率 · 自主呼吸分鐘通氣量, 自主呼吸頻率, 吸呼比, 氣道壓力(峰壓 · 平台壓 · 平均壓 · 呼末正壓), 氣道阻力, 肺順應性; 選配：二氧化碳或麻醉氣體濃度, 氧氣濃度	
EtCO ₂ 二氧化碳	option	主流/旁流
AG 麻醉氣體	option	主流/旁流
氧電池 (氧濃度監測)	option	21% - 100%

SOAR-Vet



安全 可靠 易操作



SAA-200V 動物用麻醉工作站



SOAR

總騰儀器股份有限公司

新北市汐止區茄興街156號

電話：02-86486194

信箱：soar.jimmy@gmail.com



Facebook



Official website

功能介紹




- 高度整合Mini工作站
 強大、完善的呼吸功能，適用於各種手術場景
 安全性符合國家標準，國際要求 (CE, FDA)
- SIMV-VC (同步間歇容積控制通氣模式+壓力支援)
 - SIMV-PC (同步間歇壓力控制通氣模式+壓力支援)
 - PRVC (壓力調節容積控制通氣模式)
 - VCV (容積控制通氣模式)
 - PCV (壓力控制通氣模式)
 - AUTO (自動跟隨容積控制通氣模式)
 - CT-MODE(CT室遠端操作)(option)
 - ACGO (輔助共同氣體出口)
 - 全面的監測功能

產品特點



- 整合化設計，節省手術室空間，方便醫師操作。
- 10.3" 高解析觸控螢幕，即時顯示壓力波形、流速波形和容積波形、全參數監測，讓使用者一目了然，方便使用者操作。

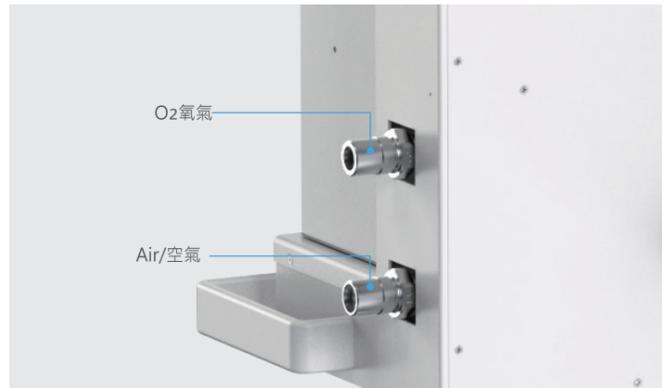

- 可選氧氣或空氣做為驅動力。



- ACGO開關：可實現非循環與循環迴路一鍵切換。
- 快速充氧：防止卡住設計，誤觸設計有效避免術中操作風險。



- APL閥可即時調整氣道壓力，高於預設壓力可自動減壓釋放，避免氣道壓力過高，使術中通氣更加安全。



- 德國 Dräger Vapor2000 揮發罐：
- 流速補償，壓力補償，溫度補償。
 - 免校準，精確的藥劑輸送，確保長期穩定輸出。